

Операционный стол Lojer Scandia SC330

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сочи (862)225-72-31
Ангарск (3955)60-70-56	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Архангельск (8182)63-90-72	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сыктывкар (8212)25-95-17
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тамбов (4752)50-40-97
Белгород (4722)40-23-64	Коломна (4966)23-41-49	Пенза (8412)22-31-16	Тверь (4822)63-31-35
Благовещенск (4162)22-76-07	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тольятти (8482)63-91-07
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)33-79-87
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Владимир (4922)49-43-18	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Чебоксары (8352)28-53-07
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Нижегород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	Чита (3022)38-34-83
Россия (495)268-04-70	Казахстан (7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	Якутск (4112)23-90-97
			Ярославль (4852)69-52-93

SCANDIATM

Операционный стол

Технические характеристики

Модели

SC330 Стол Scandia для общей хирургии, включая секции: сиденье, две секции на 25 см., две секции на 40 см. и головную секцию с двойной артикуляцией.

FA1010 Горизонтальное перемещение ложа на 300 мм., электропривод

FA1030 Моторизованная система электропривода движения стола

FA1040 Система направляющего колеса.

FA1020 защитный кожух из нержавеющей стали

Размеры/вес


- Общая длина 2070 мм.
- Ширина 550 мм. (615 мм. с боковыми рельсами)
- Безопасная рабочая нагрузка 350/280/250 кг.
- Максимальная грузоподъемность 454 кг.
- Колеса диам. 125 мм.
- Расстояние от пола 20/80 мм.
- Рабочее напряжение 230 В

Регулировки

- Высота (без матраца) 650 - 1010 мм.
- Тренделенбург/анти ренделенбург 30°/ 30° (или 35°/ 25°)
- Боковой наклон (правый/левый) 20°/ 20°
- Спинная секция (вверх/вниз) 70°/ 35°
- Ножная секция (вверх/вниз) 90°/ 90°



SC330

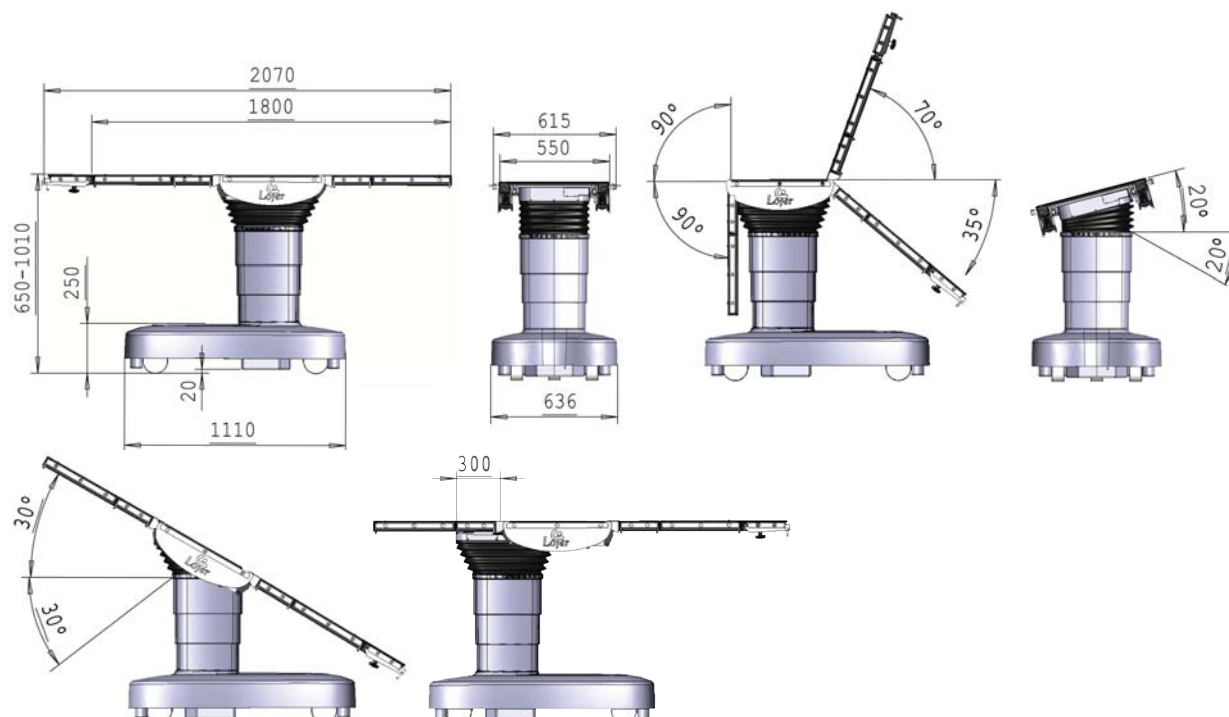

SCANDIATM

Операционный стол



SCANDIATM

Операционный стол



Операционный стол Lojer Scandia SC330 - это современный электрогидравлический универсальный стол, обладающий высокой функциональностью и качеством, являющийся идеальным решением для оснащения операционного

Модульная система секций стола позволяет добиться правильного расположения пациента при любых хирургических вмешательствах. Диапазон регулировки высоты стола - 650-1010 мм., функция продольного перемещения ложа (опция) делает его максимально гибким и удобным при всех операциях.





SCANDIATM

Операционный стол

Великолепная эргономика и легкость использования

- Модульная конструкция стола, плавные и точные регулировки положения секций
- Различные конфигурации ложа для проведения хирургических вмешательств
- Защитная система предотвращает столкновение секций стола со станиной или полом.
- Легкие и удобные секции ложа легко снимаются и устанавливаются, благодаря патентованной системе фиксации
- Опция продольного перемещения ложа придает столу



1 Свободное расстояние для проведения рентген анализа – 450 мм. с каждой стороны стола. Рункция продольного смещения ложа стола на 300 мм. в сторону головной секции (опция).

2 Минимальная высота стола - 650 мм. @агодаря использованию облегченных материалов стол стал необычайно маневренным.

3 В стандартной конфигурации стол имеет регулировку ренделенбург $\pm 30^\circ$. Ло запросу изготавливается модификация с регулировкой ренделенбург 35/25.

4 Простой и безопасный механизм крепления секций стола.

5 Взаимозаменяемость секций позволяет использовать стол для всех видов хирургических вмешательств, вне зависимости от роста и веса пациента. Облегченная конструкция секций делает стол простым в обращении.

Максимальная стабильность, маневренность и безопасность

- Стол Scandia обладает исключительность грузоподъемностью: максимальная грузоподъемность - 454 кг (при центральном позиционировании пациента).






- Маневрировать столом Scandia можно не прилагая усилий, более того, для максимального комфорта персонала, в качестве опций поставляются направляющее колесо и моторизированная система электропривода движения стола.
- Продуманный дизайн позволяет удобно расположиться персоналу возле стола во время операций.
- Уникальная система позволяет установить стол на опорные ножки и добиться максимальной стабильности.
- две аккумуляторные батареи высокой мощности.

6 Стол Scandia имеет три колеса, что дает возможность легко перемещать его во всех направлениях.

Посредством ручного пульта управления активируется четвертое направляющее колесо (опция) или моторизированная система электропривода движения стола (опция). Данные функции позволяют без труда перемещать стол даже с очень тучными пациентами.

7 Расстояние от пола 80 мм. – оптимальный доступ персонала к столу.

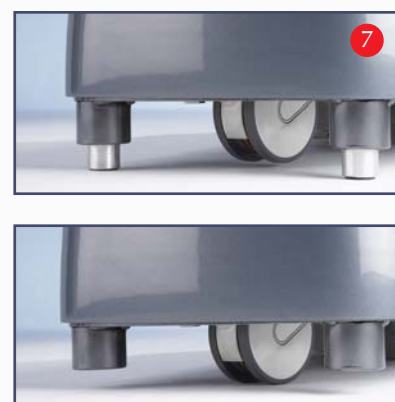

SCANDIATM

Операционный стол



БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

- Все столы Scandia комплектуются двумя одинаковыми пультами управления (основным и запасным). Опционально поставляется беспроводной пульт управления (Bluetooth)
- Четкие и логичные символы на пульте управления, подсветка пульта управления, позволяющая работать в любых условиях.
- Защита от случайного использования беспроводного пульта управления с другим столом.

Светодиодное отображение на пульте управления


- Ориентация положения пациента
- Центральный тормоз
- Уровень зарядки батареи
- Статус 4-го колеса
- Статус Bluetooth соединения
- Подсветка



- 1** Ножной пульт управления (опция) может быть подключен одновременно с двумя основными ручными пультами и управлять следующими функциями: регулировка высоты, боковой наклон и ренделенбург.

- 2** Настоящий скандинавский дизайн стола. Удобное использование со всеми рентген-аппаратами.

- 3** Легкость в обслуживании
Программное обеспечение для сервиса и модификации (соединение через USB) • Модульная конструкция • Легкий доступ ко всем кабелям и функциональным кнопкам • легко обрабатываемые

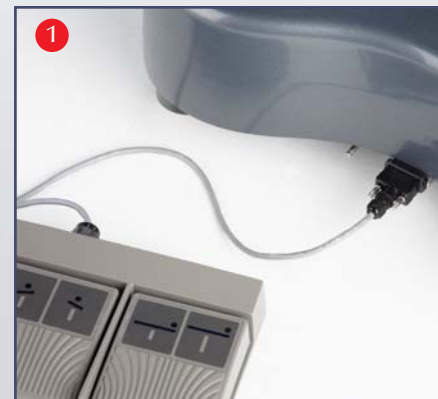



Широкий выбор аксессуаров



РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



- 1 Позиция для литотомии с использованием опор для ног с 3D перемещением (посредством газовой пружины).
- 2 Возможность установки в позицию для литотомии без
- 3



- 4 Позиция для литотомии с традиционными подколениками
- 5 Артроскопия
- 6 Малоинвазивные вмешательства в брюшной полости.
- 7 Цистоскопия/Эндоурология (со специальной секцией 40 см.)
Ножной пульт управления (3 функции)
Система мочеприемника Urocatcher
Зона флюороскопии (450 x 400 мм.) с расширяющей секцией

ЭНДОХИРУРГИЯ



ЛОР и офтальмология



РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



- 1 Нейрохирургия
- 2 Операции на плече
- 3 Позиция для операции на почках или торакальной хирургии
- 4 Общая хирургия
- 5 Ортопедия. Ортопедическая приставка крепится непосредственно к столу и следует всем его движениям. телескопические ножки придают стабильность. Приведение и отведение контролируются вне ортопедической приставки из нестерильной зоны.



Матрацы из вискоэластика

Во время операции пациент вынужден в течение долгого времени находиться в одном положении, что чревато появлением пролежней.

Матрацы столов Scandia имеют двойной слой, верхний состоит из вискоэластика и автоматически принимает форму тела пациента и его температуру.

Матрацы Scandia протестированы на электропроводимость, гигиеничность, водонепроницаемость и огнеупорность. Матрасы имеют бесшовные чехлы и крепление к столу типа «липучка».

Мы предлагаем варианты 1-, 3- и 6-секционных наборов матрасов толщиной 75 или 120 мм. По запросу изготавливаются матрасы нестандартной ширины.

Матрацы Scandia соответствуют стандартам ISO10993 (часть 10-11), ISO2878 и BS7177.



Защитный каркас станины
из нержавеющей стали

Литые матрасы

Удобные для пациента, выполненные из полиуретана литые матрасы не имеют внешних швов, что делает их максимально устойчивыми к воздействию дезинфицирующими средствами. Матрасы огнеупорны, антистатичны, не содержат

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сочи (862)225-72-31
Ангарск (3955)60-70-56	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Архангельск (8182)63-90-72	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сыктывкар (8212)25-95-17
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тамбов (4752)50-40-97
Белгород (4722)40-23-64	Коломна (4966)23-41-49	Пенза (8412)22-31-16	Тверь (4822)63-31-35
Благовещенск (4162)22-76-07	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тольятти (8482)63-91-07
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)33-79-87
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Владимир (4922)49-43-18	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Чебоксары (8352)28-53-07
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Нижегород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	Чита (3022)38-34-83
Россия (495)268-04-70	Казахстан (7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	Якутск (4112)23-90-97
			Ярославль (4852)69-52-93